



Parasine Rapid

EN Solution for treating lice and nits
ET Lahus täide ja tingude esinemisel kasutamiseks

EN Parasine Rapid:

Please read the instructions for use carefully as they contain important information.

Parasine Rapid is a medical device. Follow the instructions for use carefully. Keep the instructions for use in case you need to read them again. If you have any questions, or if you need further information, please do not hesitate to contact your pharmacist.

Intended purpose: The medical device Parasine Rapid is indicated for human use to eliminate lice in the patient's hair.

Ingredients: Isopropyl myristate, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Nerolidol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Thymus Vulgaris Oil.

Characteristics: The main active substance in medical device Parasine Rapid is isopropyl myristate and cyclomethicone D5. Isopropyl myristate ensures the physicochemical disruption of the waxy layers of the exoskeleton of lice with their subsequent dehydration and death. Cyclomethicone D5 prevents air from getting to the lice and their eggs, leading to their subsequent suffocation and/or rupture. Tea tree and thyme essential oil provide an additional function by preventing the scalp irritation that accompanies the occurrence of head lice.

Indications: Parasine Rapid is indicated to eliminate lice and their eggs in the patient's hair.

Contraindications: Hypersensitivity to any one of the substances stated in the ingredients of the product.

Interactions: No undesirable interactions are known for any of the product's ingredients. If other products are used, this topical product may be washed out when using Parasine Rapid.

Adverse effects: The product is usually very well tolerated. Skin irritation may occur in rare cases, manifested through itching or redness. If any of these adverse effects occur to a serious extent, or if you notice any adverse effects that are not mentioned in these Instructions for Use, please contact a doctor or pharmacist. Any serious adverse effect that occurred in connection with the use of this medical device should be reported to the manufacturer and to the competent national authority.

Dosage and method of application:

Parasine Rapid can be used for children from 2 years of age and adults, including pregnant and nursing women. Children under 15 years of age should use the product under adult supervision. Do not use the product in the event of hypersensitivity to any of the product's ingredients. The product is intended for external use only.

- Before applying the product, check for the presence of lice in the hair of all family members. It is vital to treat everyone with a proven infestation of lice at the same time in order to prevent re-infestation.
- Cover the person's shoulders with a towel.
- Unscrew the applicator cap. Apply the product to dry hair by repeatedly squeezing the bottle, moving from the forehead to the top of the head, then continue to the ears and nape along the entire length of the hair. The amount of solution will depend on the thickness and length of the hair and the degree of infestation. For shoulder-length hair, you should use approximately 50 ml of the product.
- After application, rub the solution thoroughly and evenly into the hair so that it is well moistened along its entire length, including the scalp.
- Leave on for 10 minutes after applying the solution.
- After the minimum requisite time has elapsed, comb the hair with a fine-toothed comb along individual strands.
- Remove any parasites from the comb as you go.
- After combing, rinse your hair with lukewarm water and then wash with shampoo.

Regularly check the hair for the occurrence of lice and/or nits over the next 10 days. Immediately repeat the procedure if lice/nits are present or if you are unsure whether they are alive or dead.

Repeat the procedure after ten days even if no live lice and/or nits were found when examining the hair. This will prevent re-infestation in the event an examination failed to find any lice or nits that might have survived.

As an auxiliary measure that effectively reduces the risk of re-infestation, we recommend that you also check all members of the family at the same time. It is further recommended to wash clothes, bed linen, towels, etc. at a temperature of 60 °C. Combs and similar items can be decontaminated by placing them in water at a temperature of 60 °C for 10 minutes. Unwashable items that need to be decontaminated should be placed in a plastic bag and left in the refrigerator for 5 days, or at room temperature for 3 weeks. Clean your place of residence thoroughly, in particular the carpets, upholstery, etc.

Caution:

- ⚠ Upon accidental ingestion, drink plenty of water immediately and if you have any further problems, please contact a doctor.
- ⚠ If the solution gets into your eyes, rinse with water immediately for about 10 minutes.
- ⚠ If there is any skin irritation (redness, pain, itching) contact a doctor immediately.

Storage: Keep out of the reach and sight of children. Keep in the original packaging.



Warning:

- ⚠ Do not apply the product to broken skin.
- ⚠ If it enters a wound, wash with water or a readily available disinfectant.
- ⚠ Do not use the product after the expiration date.

Packaging: Parasine Rapid is supplied in a PE bottle with a cap. The bottle contains 100 ml or 200 ml of solution. Both packagings may not be available on the market.

Disposal: Return any unused product to the pharmacy. Dispose of the clean packaging material in the appropriate recycling bin.

Basic UDI-DI: 859407127PR25

ENEO Pharmaceuticals s. r. o., 281 67 Stříbrná Skalice, Czech Republic
www.eneo.cz, e-mail: info@eneo.cz

Data is stated on the package

ET Parasine Rapid:

Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi, sest see sisaldab olulisi andmeid.

Preparaat Parasine Rapid on meditsiiniseade. Pidage selle kasutamisel kinni käesolevast kasutusjuhendist. Jätke kasutusjuhend alles juhaks, kui seda on vaja uuesti lugeda. Kui teil tekib mis tahes küsimusi või te vajate lisateavet, pöörduge apteekri poole.

Sihtotstarve: Meditsiiniseade Parasine Rapid on mõeldud inimkasutuseks – parasitaarse haiguse, täide kõrvaldamiseks patsiendi pea juustega kaetud osalt.

Koostis: Isopropyl myristate, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Nerolidol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Thymus Vulgaris Oil.

Iseloomustus: Meditsiiniseade Parasine Rapid sisaldab peamiste toimeainetena isopropüülmüristaati ja tsüklometikoon D5. Isopropüülmüristaat tagab täide eksoskeleti struktuuri vahakihi füüsikalis-keemilise kahjustamise, millele järgneb täide veetustamine ja surmamine. Tsüklometikoon D5 kõrvaldab õhu juurdepääsu täidele ja tingudele, mis toob kaasa nende lämbumise ja/või pragunemise. Preparaadi lisafunktsioon on täide esinemise tõttu ärritatud juustealuse naha kaitsmine, mille tagab teepuuõli ja tüümiani eeterliku õli kombinatsioon.

Näidustused: Parasine Rapid on mõeldud parasitaarse haiguse, täide ja tingude esinemise kõrvaldamiseks patsiendi pea juustega kaetud osalt.

Vastunäidustused: Ülitundlikkus preparaadi ükskõik millise koostisosa suhtes.

Koostoimed: Preparaadi mitte ühegi koostisosa kohta ei ole koostoimeid seni teada. Teiste toopiliste preparaatide kasutamise korral võib esineda nende väljauhtumist Parasine Rapid kasutamisel.

Kõrvaltoimed: Preparaat on tavaliselt väga hästi talutav. Üksikutel juhtudel võib esineda nahaärritust, mis ilmneb sügeluse või punetusena. Kui ükskõik milline kõrvaltoime esineb raskel kujul või kui te märkate mis tahes kõrvaltoimeid, mida ei ole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud, pöörduge arsti või apteekri poole. Igast toisest kõrvaltoimest, mis on tekkinud seoses selle meditsiiniseadme kasutamisega, tuleb teatada tootjale ja vastava riigi pädevale asutusele.

Annustamine ja manustamisviis:

Võib kasutada lastel alates 2 aasta vanusest ja täiskasvanutel, sealhulgas rasedatel ja imetavatel naistel. Alla 15-aastased lapsed peavad preparaati kasutama täiskasvanute järelevalve all. Ärge kasutage ülitundlikkuse esinemisel ükskõik millise koostisosa suhtes. Preparaat on mõeldud ainult välispidiseks kasutamiseks.

- Enne preparaadi pealekandmist kontrollige täide esinemist kõigi pereliikmete juustes. Täide korduva ülekandumise takistamiseks tuleb nimelt kasutada preparaati kõigil, kellel avastatakse sama päeva jooksul täide esinemine.
- Katke ravi saaja õlad käterätikuga.
- Keerake aplikaatori sulgur lahti. Kandke preparaat pudeli korduva pigistamisega kuivadele juustele. Alustage pealaest ning liikuge juuste kogu pikkuses kõrvade ja kukla poole. Vajalik lahuse kogus sõltub eelkõige juuste tihedusest ja pikkusest ning täide hulgast. Õlani ulatuvatele juustele kulub umbes 50 ml preparaati.
- Pärast pealekandmist hõõruge lahuse juustes ühtlaselt laiali, et juuksed kogu oma pikkuses ja juustega kaetud peanahk oleksid korralikult niisutatud.
- Pärast lahuse pealekandmist laske sellel 10 minutit mõjuda.
- Pärast minimaalse nõutava toimeaja möödumist kammige juuksed salkhaaval tiheda kammiga läbi.
- Välja kammitud parasiite eemaldage kammilt jooksvalt.
- Pärast kammimist loputage juukseid leige veega ja seejärel peske neid šampooniga.

Järgmised 10 päeva kontrollige regulaarselt, ega juustes ei esine täisid ja/või tinge. Nende esinemisel või juhul, kui te ei ole kindel, kas tegu on näiteks elusate või juba hukkunud tingudega, korrake kohe protseduuri.

Ka siis, kui te ei leia 10 päeva jooksul pärast esimest kasutamist ühtegi elusat täid ega tingu, korrake protseduuri 10 päeva möödudes esimesest kasutamisest. Nii takistate te nende uut levikut ka sel juhul, kui neid ei õnnestunud kontrollimisel avastada ja nad jäid siiski ellu.

Abimeetmena, mis vähendab tõhusalt uuesti nakatumise ohtu, soovime ühtlasi kontrollida kõigi pereliikmete juukseid. Samuti tasub pesta rõivad, voodipesu, rätikud jne temperatuuril 60 °C. Kammid ja muud taolised esemed võib dekontamineerida nende asetamisega 10 minutiks 60 °C vette. Mittepestavad esemed, mida on tarvis dekontamineerida, pange kilekotti ja asetage 5 päevaks külmkappi või hoidke neid 3 nädalat toatemperatuuril. Koristage hoolikalt eluase, eriti vaibad, pehme mööbel jne.

Tähelepanu:

- ⚠ Juhuslikul allaneelamisel jooge kohe peale suurem kogus vett ja pöörduge mis tahes tervisehäirete tekkimisel arsti poole.
- ⚠ Lahuse silma sattumisel uhtuge silma kohe umbes 10 minutit veega.
- ⚠ Kui tekkib ärritus (punetus, valu, põletustunne), pöörduge kohe arsti poole.

Säilitamine: Hoidke lastele kättesaamatus ja mittenähtavas kohas. Säilitage originaalpakendis.



Hoiatused:

- ⚠ Kandke preparaati ainult tervele nahale.
- ⚠ Haava sattumisel uhtuge haava veega või tavalise desinfitseerimisvahendiga.
- ⚠ Ärge kasutage preparaati pärast selle kõlblikkusaja möödumist.

Pakend: Parasine Rapid on müügil sulguriga varustatud PE-pudelis. Pudel sisaldab 100 ml või 200 ml lahust. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Kõrvaldamine: Kasutamata jäänud preparaati viige tagasi apteeki, puhas pakkematerjal visake vastavasse sortitud jäätmete konteinerisse.

Basic UDI-DI: 859407127PR25

ENEO Pharmaceuticals s. r. o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Tšehhi Vabariik, www.eneo.cz, e-mail: info@eneo.cz

Andmeid vt pakendilt

C-400-355-21-EE-R2 from 21st May 2026

	Temperature limit.		Batch number.
	Protect from sunlight.		Use by date.
	Read instruction for use.		Manufacturer.
	Catalogue number.		Warning.
	Medical device.		Unique device identifier.

C-400-355-21-EE-R2, kuupäev 21. 05. 2026

	Piirtemperatuur.		Partii number.
	Kaitsta päikesekiirguse eest.		Kasutada kuni.
	Lugege kasutusjuhendit.		Tootja.
	Viitenumber.		Hoiatus.
	Meditsiiniseade.		Seadme kordumatu identifitseerimistunnus.



Parasine Rapid

Roztwór do leczenia wszawicy
 Soluție pentru tratament în cazul apariției păduchilor și lindinilor

Parasine Rapid:

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

Preparat Parasine Rapid jest wyrobem medycznym. Przy jego użyciu należy przestrzegać wskazań zawartych w niniejszej ulotce. Proszę zachować ulotkę na wypadek, gdyby była ona ponownie potrzebna. W przypadku jakichkolwiek pytań lub gdy potrzebne będą dalsze informacje, należy skontaktować się z farmaceutą.

Przewidziane zastosowanie: Produkt medyczny Parasine Rapid jest przeznaczony do stosowania u ludzi w celu eliminacji choroby pasożytniczej wszawicy głowowej pacjentów.

Skład: Isopropyl myristate, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Nerolidol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Thymus Vulgaris Oil.

Charakterystyka: Wyrób medyczny Parasine Rapid zawiera jako główne substancje czynne isopropyl myristate i cyclomethicone D5. Isopropyl myristate powoduje fizykochemiczne uszkodzenie warstwy woskowej struktury egzoszkieletu wszy, w efekcie czego następuje odwodnienie wszy i ich uśmiercenie. Cyclomethicone D5 pozbawia wszy dopływu powietrza do wszy i ich jajeczek, co prowadzi do ich następnego uduszenia i/lub pęknięcia. Uzupełniającą funkcją preparatu jest ochrona podrażnionej skóry głowy, która towarzyszy występowaniu wszy, dzięki połączeniu olejku z drzewa herbacianego i tymiankowego.

Wskazania: Parasine Rapid przeznaczony jest do eliminacji choroby pasożytniczej wszawicy, w tym także gnid, z owłosionej części głowy pacjenta.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji podanych w składzie preparatu.

Interakcje: Dotychczas nie odnotowano żadnych niepożądanych interakcji dla żadnego ze składników preparatu. W przypadku stosowania innych preparatów działających miejscowo przy zastosowaniu Parasine Rapid może dojść do zmucia tego działającego miejscowo preparatu.

Działania niepożądane: Preparat jest zazwyczaj bardzo dobrze tolerowany. W pojedynczych przypadkach może nastąpić podrażnienie skóry z objawami swędzenia lub zaczerwienienia. Jeżeli którykolwiek ze skutków ubocznych występuje w większym zakresie lub zaobserwowane zostaną jakiegokolwiek skutki uboczne, które nie są wymienione w niniejszej ulotce, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Każde poważne działanie niepożądane występujące w związku ze stosowaniem tego wyrobu medycznego, należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi w danym kraju.

Dawkowanie i stosowanie:

Preparat nadaje się do zastosowania u dzieci od lat 2 i dorosłych, a także dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Dzieci w wieku poniżej 15 lat powinny stosować preparat pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego.

1. Przed rozpoczęciem stosowania należy sprawdzić obecność wszy we włosach wszystkich członków rodziny. Preparat powinien być zastosowany tego samego dnia u wszystkich osób, u których pojawiły się wszy, aby uniknąć ich ponownego przeniesienia.
2. Ramiona osoby, u której aplikowany jest preparat przykryć ręcznikiem.
3. Odkręcić nakrętkę aplikatora. Preparat nanosić na suche włosy wielokrotnie naciskając butelkę. Rozpocząć od czoła w stronę czubka głowy, następnie w stronę uszu i karku na całej długości włosów. Ilość użytego roztworu zależy przede wszystkim od gęstości i długości włosów oraz stopnia zawszienia. Do włosów sięgających ramion zużycie wynosi około 50 ml preparatu.
4. Po naniesieniu preparat należy dokładnie wetrzeć równomiernie we włosy, aby były dobrze nawilżone wzdłuż całej swojej długości wraz ze skórą głowy.
5. Po naniesieniu preparatu należy odczekać 10 minut.
6. Po upływie minimalnego czasu działania należy rozczesać włosy gęstym grzebieniem wybierając każdorazowo pojedyncze kosmyki.

7. Wyczesane pasożyty należy na bieżąco usuwać z grzebienia
8. Po rozczesaniu włosy spłukać letnią wodą i następnie umyć szamponem.

W ciągu następnych 10 dni należy regularnie sprawdzać, czy we włosach nie pojawiają się wszy i/lub gnidy. W przypadku ich występowania lub w przypadku niepewności, czy we włosach znajdują się żywe czy tylko martwe gnidy, należy natychmiast powtórzyć procedurę.


Nawet jeśli w ciągu 10 dni po zastosowaniu preparatu nie stwierdzi się obecności żywych wszy i/lub gnid, zabieg należy powtórzyć po 10 dniach od poprzedniego zastosowania. Pozwala to zapobiec ponownemu namnażaniu się pasożytów, w przypadku, gdy pojedyncze osobniki przetrwały pomimo kontroli.

Zapobiegawczo, jako środek, który skutecznie obniża ryzyko ponownego zarażenia się, zaleca się przeprowadzenie równoczesnej kontroli u wszystkich członków rodziny. Ponadto wskazane jest wypranie odzieży, pościeli, ręczników itp. w temperaturze 60°C. Grzebień i podobne przedmioty można odkazić wkładając je do wody o temperaturze 60°C na 10 minut. Przedmioty, których nie da się umyć, a które trzeba odkazić, włożyć do plastikowego pojemnika i umieścić w lodówce na 5 dni lub przechowywać w temperaturze pokojowej przez 3 tygodnie. W miejscu zamieszkania należy wykonać dokładne sprzątanie, przede wszystkim dywanów, tapicerki itp.

Ostrzeżenia:

- W razie przypadkowego spożycia popić większą ilością wody, a w razie jakichkolwiek problemów skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku, gdy roztwór przedostanie się do oczu skażone miejsce obficie płukać wodą przez ok. 10 minut.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia (zaczerwienienie, ból, pieczenie) natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

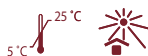

Ostrzeżenia:

- Preparat należy nanosić tylko na skórę bez ran.
- W przypadku przeniknięcia do rany należy ją przemyć wodą, ewentualnie zwykłym środkiem do dezynfekcji.
- Nie używać preparatu po upływie daty ważności.

Opakowanie: Parasine Rapid jest dostępny w butelce z zamknięciem. Butelka zawiera 100 ml lub 200 ml roztworu. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Utylizacja: Niezużyty preparat należy zwrócić do apteki. Czyste opakowanie wyrzucić do właściwego pojemnika z segregowanymi odpadami.

Basic UDI-DI: 859407127PR25

ENEO Pharmaceuticals s. r. o., Pražská 442, 281 67 Strábrná Skalce, Republika Czeska, www.eneo.cz, e-mail: info@eneo.cz
 Informacje podane są na opakowaniu



C-400-355-21-EE-R2 z dnia 21. 05. 2026

Limit temperatury.	Numer partii.
Chronić przed promieniowaniem słonecznym.	Data ważności.
Zapoznać się z instrukcją używania.	Producent.
Numer referencyjny.	Ostrzeżenie.
Wyrób medyczny.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu.

Parasine Rapid:

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare deoarece conțin informații importante.

Preparatul Parasine Rapid este un dispozitiv medical. La utilizarea acestuia respectați indicațiile din prezentele instrucțiuni de utilizare. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru cazul în care va trebui să le citiți din nou. În cazul oricăror întrebări sau dacă aveți nevoie de informații suplimentare, nu ezitați să vă adresați farmacistului.

Scopul propus: Dispozitivul medical Parasine Rapid este destinat uzului uman, pentru eliminarea infestării cu păduchi în cazul apariției păduchilor de cap.

Compoziție: Isopropyl myristate, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Nerolidol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Thymus Vulgaris Oil

Caracteristici: Dispozitivul medical Parasine Rapid conține două substanțe active cu dublă acțiune: Miristatul de izopropil dizolvă stratul de ceară de la suprafața exterioară a păduchilor, ceea ce duce la deshidratarea și, ulterior, la moartea acestora. Ciclometicona D5 (Ciclopentasiloxan) este o substanță pe bază de silicon care blochează aportul de aer către păduchi și ouăle acestora (lindini), ducând la sufocarea și/sau deshidratarea acestora. Produsul conține nerolidol. Combinația de ulei de tea tree (arboare de ceai) și ulei esențial de cimbru calmează scalpul iritat.

Indicații: Parasine Rapid este destinat eliminării infestării cu păduchi în cazul apariției păduchilor de cap și a ouălor acestora din părul pacienților.

Contraindicații: Hipersensibilitate la oricare din substanțele cuprinse în compoziția preparatului.

Interacțiuni: Pentru nici una din componentele preparatului nu sunt cunoscute până în prezent interacțiuni nedorite. În cazul utilizării altor preparate topice la utilizarea Parasine Rapid, poate să intervină spălarea acestui preparat topic.

Efecte nedorite: De obicei, preparatul este foarte bine tolerat. În cazuri izolate poate apărea o iritație a epidermei care se manifestă prin mâncărime sau înroșire. În cazul în care apar efecte adverse grave sau în cazul în care observați efecte adverse care nu sunt menționate în prezentele instrucțiuni de utilizare, adresați-vă medicului sau farmacistului. Orice reacție adversă gravă apărută în legătură cu utilizarea acestui dispozitiv medical trebuie raportată producătorului și autorității naționale competente.

Dozare și mod de administrare:

Poate fi utilizat la copii începând cu vârsta de 2 ani și adulți, inclusiv femei gravide și care alăptează. Copiii sub 15 ani ar trebui să utilizeze preparatul sub supravegherea adulților. Nu utilizați preparatul în cazul hipersensibilității la oricare din ingredientele acestuia. Preparatul este destinat exclusiv uzului extern.

1. Înainte de a începe aplicarea, verificați prezența păduchilor în păr la toți membrii familiei. Este necesară îngrijirea tuturor persoanelor la care se dovedește prezența păduchilor în aceeași zi, ca să se împiedice transmiterea repetată.
2. Acoperiți cu un prosop umerii persoanei îngrijite.
3. Deschideți prin deșurubare capacul pulverizatorului. Aplicați preparatul pe părul uscat prin apăsarea repetată a flaconului. Începeți de la linia părului de pe frunte și înaintați spre creștetul capului. Apoi spre urechi și ceafă, pe întreaga lungime a părului. Cantitatea necesară de soluție depinde mai ales de desimea, lungimea părului și de gradul de infectare cu păduchi. Pentru părul lung până la umeri este necesară o cantitate de circa 50 ml de preparat.
4. În urma aplicării, masați bine și uniform soluția în păr pentru ca acesta să fie umezit bine pe întreaga sa lungime, inclusiv scalpul.
5. După aplicare, lăsați soluția să acționeze timp de 10 minute.
6. După expirarea perioadei minime cerute de acțiune, pieptănați părul cu un pieptene des, pieptănând fiecare șuviță separat.
7. Curățați pieptenele de paraziți pe măsură ce îi îndepărtați.
8. După pieptănare, clătiți părul cu apă caldă și apoi spălați cu șampon.

În următoarele 10 zile verificați periodic dacă în păr apar păduchi și/sau lindine. În cazul apariției acestora sau în cazul în care nu sunteți siguri dacă, de exemplu, lindinile sunt vii sau moarte, repetați imediat procedura.

După 10 zile repetați procedura, chiar dacă în urma aplicării precedente nu găsiți păduchi și/sau lindini vii. Astfel veți preveni reinfestarea în cazul în care la verificare nu ați depistat păduchi sau lindini care totuși au supraviețuit.

Ca o măsură suplimentară de reducere eficiență a riscului reinfestării, recomandăm să se efectueze simultan verificarea părului tuturor membrilor familiei. De asemenea, este recomandat să se spele toată îmbrăcămintea, lenjeria de pat, prosoapele etc. la temperatura de 60 °C. Pieptenul și obiectele asemănătoare se pot decontamina prin introducerea în apă la temperatura de 60 °C pentru 10 minute. Obiectele nelavabile care necesită decontaminare trebuie introduse într-un ambalaj de plastic și ținute la frigider timp de 5 zile sau la temperatura camerei timp de 3 săptămâni. În locuință faceți o curățenie generală, curățând în special covoarele, tapițeria etc.

Avertizare:

- În cazul ingerării accidentale, beți imediat o cantitate mai mare de apă și în cazul oricăror dificultăți, contactați un medic.
- În cazul pătrunderii soluției în ochi, clătiți imediat cu apă timp de aproximativ 10 minute.
- Dacă a apărut iritația (înroșire, durere, usturime), contactați imediat un medic.

Păstrarea: A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. A se păstra în ambalajul original.



Avertizare:

- Nu aplicați preparatul pe piele dacă aceasta prezintă leziuni.
- În cazul pătrunderii soluției într-o leziune, spălați cu apă sau aplicați un dezinfectant obișnuit.
- Nu utilizați preparatul după expirarea termenului de valabilitate.

Ambalaj: Parasine Rapid este livrat într-un flacon PE prevăzut cu capac. Flaconul conține 100 ml sau 200 ml de soluție. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Eliminare deșeurilor: Orice dispozitiv medical neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale.

Basic UDI-DI: 859407127PR25

ENEO Pharmaceuticals s. r. o., 281 67 Strábrná Skalce, Republica Cehă
www.eneo.cz, e-mail: info@eneo.cz

datele sunt specificate pe ambalaj



C-400-355-21-EE-R2 din data de 21. 05. 2026

Limitare de temperatură.	Număr lot.
Protejați contra radiațiilor solare.	Data expirării.
Citiți instrucțiunile de utilizare.	Denumirea producătorului.
Număr de referință.	Avertizare.
Dispozitiv medical.	Identificatori unici ai dispozitivelor.